

# beurer FC 76



## Uputstvo za upotrebu



Pažljivo pročitajte uputstvo, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim i drugim korisnicima i pridržavajte se uputa.



## UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen samo za kućnu/privatnu upotrebu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za osobe mlađe od 18 godina.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim psihičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i to samo onda kada ih neko nadgleda ili ako su dobili upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i samo ako razumiju koje opasnosti mogu nastati nestručnim korištenjem uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Održavanje i čišćenje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ukoliko se ošteti priključni kabal ovog uređaja, isti treba da zamijeni proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba.

## Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, te učinite ih dostupnim trećim licima i poštujuete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

Obim isporuke:










- 1x FC 76 baza
- 1x precizioni nastavak
- 1x grubi nastavak
- 1x glatki nastavak
- 20x jednokratnih filtera
- 1x adapter
- Ovo uputstvo za korištenje

## 1. O uređaju

FC 76 Vam pruža profesionalni peeling lica na bazi tehnike mikrodermoabrazije. Uz pomoć visokokvalitetnog safirnog sloja blago se skidaju prekomjerne čestice kože i modernom tehnikom vakuuma znatno se poboljšava struktura kože lica i pospješuje prokrvljenost. Dodatno se potiče obnavljanje ćelija, čime koža izgleda nježna i glatka.

## 2. Opis simbola

Slijedeći simboli nalaze se u ovom uputstvu i na tipskoj pločici:

	<b>UPOZORENJE</b> Napomena o mogućim povredama ili opasnostima za Vaše zdravlje
	<b>PAŽNJA</b> Sigurnosne napomene o mogućim štetama na aparatu/priboru.
	<b>OPASNOST</b> Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (npr. kadi, pod tušem, u lavabou) – postoji opasnost od strujnog udara!
	<b>NAPOMENA</b> Napomena o bitnim informacijama.
	Pridržavajte se uputstva za upotrebu.
	Ovaj uređaj ima duplu zaštitu.
	Uređaj odložite u skladu sa EG Smjernicom za stare elektronske i električne uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electroni Equipment)
	Proizvođač
	Koristiti samo u zatvorenim prostorijama.

### 3. Upotreba prema svrsi namjene

Ovaj uređaj koristite isključivo na ljudskom licu odraslih (izuzev područja oko očiju i usta)

Ovaj uređaj nemojte koristiti na životinjama!

Uređaj je namijenjen za svrhe opisane u ovom uputstvu.

Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nestručnom ili lakomislenom upotrebom.

### 4. Sigurnosne napomene



#### UPOZORENJE

- Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Prije upotrebe provjerite da na uređaju i priboru nema vidljivih oštećenja. U slučaju nedoumice nemojte koristiti uređaj i vratite ga trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.
- Mrežni adapter držite dalje od vode.



#### OPASNOST

Uređaj nemojte koristiti u blizini vode ili u vodi (npr. u umivaoniku, ispod tuša, u kadi) – postoji opasnost od strujnog udara!



#### UPOZORENJE

Uređaj **NEMOJTE** koristiti :

- ukoliko imate ispucalu kožu.
- ukoliko imate otvorene rane.
- na području oko očiju i usta.
- na drugim dijelovima tijela osim na licu (uz iznimku područja oko očiju i usta).
- ukoliko imate kožno oboljenje (npr. herpes, vaskularna oboljenja ili izrasline na koži).
- ukoliko imate rak kože.
- ukoliko imate iziritiranu kožu.
- neposredno poslije sunčanja.
- ukoliko uzimate lijekove koji sadrže steroide.
- ukoliko uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi.
- ako bolujete od jedne od narednih bolesti: multiple skleroze, dijabetesa, autoimune bolesti.



#### UPOZORENJE

Uređaj koristite samo sa isporučenim adapterom i priključite ga samo na onaj napon struje, koji je naveden na adapteru.



#### PAŽNJA

Popravku električnih uređaja smiju vršiti samo stručne osobe. Nestručnim popravkama mogu nastati opasnosti po korisnika. U slučaju popravki obratite se svom trgovcu.



## UPOZORENJE

- Uređaj koristite samo u suhim prostorijama (npr. nikada u kadi, sauni).
- Nikada nemojte posezati za uređajem ako Vam je ispao u vodu. U tom slučaju odmah ga isključite iz struje.
- Uređaj zaštitite od udaraca. Uređaj Vam ne smije ispasti.
- Nemojte priklještavati kabal.
- Pazite da kabal ili adapter ne dođu u dodir sa vodom, parom ili drugim tečnostima.

## 5. Opis uređaja



1. Precizioni nastavak sa finim safirnim slojem, pogodan za precizne tretmane na manjim površinama (npr. područje oko nosa)
2. Veliki nastavak sa finim safirnim slojem, pogodno za osjetljivu kožu
3. Grubi nastavak sa grubim safirnim slojem, pogodno za intenzivni tretman problematičnih zona
4. Ručni uređaj
5. Prekidač ON/OFF i podešavanje nivoa intenziteta

## 6. Primjena



### Napomena

Prije same primjene uređaja, trebate osigurati da je koža čista, suha i bez ostataka pudera, krema ili make-up-a.

### 6.1 Izvođenje testa podnošljivosti na koži

24 sata prije upotrebe uređaja izvršite test podnošljivosti na koži. Kod testiranja, uređaj treba da radi na najnižem nivou intenziteta, a test se vrši na manje vidljivim dijelovima kože na vratu. Ukoliko testirani dio kože bude crven ili bolan nakon 24 sata, uređaj ne smijete koristiti.



## UPOZORENJE

- Uređaj nemojte koristiti češće od jednom puta sedmično.
- Može se desiti da koža bude blago crvena direktno nakon tretmana, u jako rijetkim slučajevima dolazi do krvarenja kože.
- Izbjegavajte aktivnosti zbog kojih se znojite, odlazak u saunu, solarij ili sunčanje




### Napomena

Kod neosjetljive problematične kože uređaj se može koristiti i 2 x sedmično (sa najmanje 48 sati pauze između dva tretmana).

### 6.2 Korištenje uređaja


1. Spojite adapter na uređaj i uključite adapter u utičnicu.

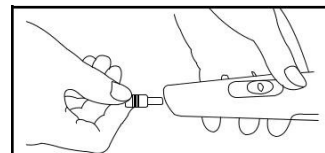

Ubacite jednokratni filter u glavu uređaja

2. Stavite nastavak koji želite da koristite na vrh ručnog uređaja

4. Za aktiviranje uređaja, pomjerite prekidač ON/OFF do željenog intenziteta

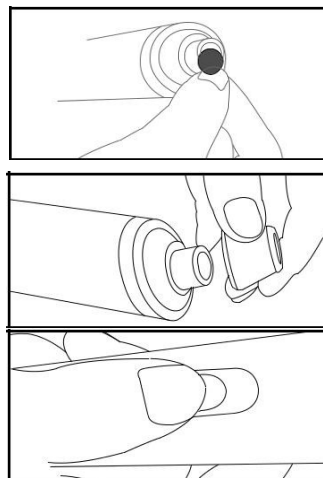


5. Stavite ručni uređaj na lice i polako prelazite preko kože. Pazite da ručnim uređajem ne pređete više od jednog puta preko istog dijela kože na licu. Detaljnije o samom području primjene možete pročitati u poglavlju "6.3 Područje primjene".



#### Napomena

**Pritisak za vrijeme primjene treba biti ugodan i bezbolan. Nakon tretmana pojaviće se blago crvenilo na koži.**

6. Kada ste završili sa tretmanom, uređaj ugasite pritiskom na tipku EIN/AUS (on/off) i adapter isključite iz struje.
7. Nakon svake primjene promijenite jednokratni filter. U tu svrhu ručni aparat skinite sa šlauha. Uklonite jednokratni filter uz pomoć pincete.

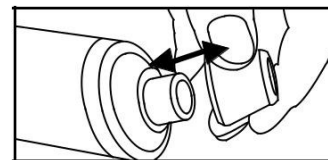

### 6.3 Područja primjene




#### Napomena

**Pazite da je tretirani dio kože zategnut kada preko njega prelazite uređajem.** To postizete tako što ćete slobodnom rukom zategnuti kožu lica prema dolje ili u stranu.


#### Čelo:

Uređajem se blago i ravnomjerno krećite od sredine čela prema vani. Pazite da jedan dio kože ne tretirate dva puta.

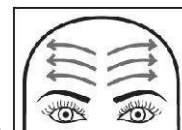


#### Sljepoočnice:

Uređajem se krećite prema vani u pravcu početka kose. Isti postupak ponovite na lijevoj i na desnoj sljepoočnici. Pazite da od uređaja do oka bude najmanje 1 cm razmaka.

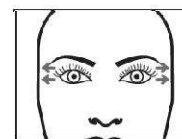

#### Nos:

Uređajem se krećite od gornjeg mosta nosa sredinom prema dolje. Ponovite postupak na lijevoj i desnoj strani nosa.

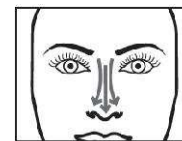


**Obrazi:**

Uređajem se krećite prema vanjskom rubu obraza.

**Oko usta:**

Uređajem se krećite po gornjoj usnici od sredine prema lijevo i desno. Uređajem se krećite po donjoj usni prema gore lijevo i gore desno. Pazite da usne direktno ne dodirujete!

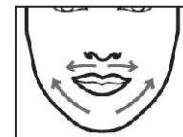**7. Čišćenje i održavanje**

- Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tečnosti!
- Nastavke dezinficirajte nakon svake upotrebe uz pomoć standardnog sredstva za dezinfekciju.
- Mijenjajte jednokratni filter nakon svake upotrebe.
- Kod zaprljanja uređaj čistite suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
- Uređaj zaštitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija i blizine toplotnih izvora (pećnice...).

**8. Rezervni dijelovi**

Rezervne dijelove možete naručiti kod ovlaštenog trgovca. Molimo da navedete odgovarajući broj artikla za narudžbu.

Rezervni dio	Broj artikla za narudžbu
20 jednokratnih filtera	163.660
Precizionni nastavak	163.750
Grubi nastavak	163.749
Veliki nastavak	163.748

**9. Odlaganje**

Uređaj odložite u skladu sa Odredbom za električne i elektronske stare uređaje 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

**10. Tehnički podaci**

Napajanje strujom	100-240V / 50/60 Hz
Dimenzije	190 x 40 x 39 mm
Težina	~128 g