



## TRIA LASER – Laser za uklanjanje dlačica

LAS 100

By Beurer

### Tabela nijansi boje kože

**PROVJERITE VAŠU NIJANSU BOJE KOŽE** da biste saznali da li možete bezbjedno koristiti Tria laser za uklanjanje neželjenih dlačica. Uporedite kožu u području koje želite da tretirate sa opsegom nijansi kože prikazanim u ovoj tablici. Ako se vaša nijansa / ton kože podudara sa bilo kojim od tonovima kože označenim kao "Nije bezbjedno" za tretman, onda **NEMOJTE KORISTITI** Tria Laser.

Namijenjeno nijansama boje kože:



Nije bezbjedno:



Za upotrebu na:

Nogama; Rukama; Bikini zoni; Području pazuha; Stopalima; Rukama; Prsima; Leđima; Stomaku; na području neželjenih dlačica na licu (pogledajte tabelu ispod)

### PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE

Prije nego što upotrijebite svoj novi Tria Laser, pročitajte ovu brošuru zbog važnih informacija:

- Potvrdite da je Tria Laser bezbjedan za vas.
- Naučite kako da koristite Tria Laser.
- Pogledajte vremensku skalu rezultata tretmana.
- Pročitajte naše savjete za najbolje rezultate.
- Pregledajte kontraindikacije i upozorenja, koja su označena simbolom ispod:



Ovaj **simbol upozorenja** pojavljuje se pored informacija o mogućim bezbjednosnim rizicima.

Obavezno pročitajte i pratite sva upozorenja i bezbjedonosne informacije. Preporučujemo da sačuvate ova uputstva za buduću preporuku. Ako imate pitanja ili problem, molimo kontaktirajte Tria Beauty korisnički servis. Također možete pronaći *Vodič za brzi početak* na našoj web stranici.

## Sadržaj:

UVOD.....	2
UPOZNAVANJE SA VAŠIM TRIA LASEROM.....	2
ZA ŠTA se koristi TRIA LASER (INDIKACIJE)?.....	3
KO NE SMIJE UPOTREBLJAVATI TRIA LASER (KONTRAINDIKACIJE).....	3
UPOZORENJA.....	3
PREDNOSTI I RIZICI.....	5
PREGLED TRIA LASER TRETMANA.....	6
ŠTA OČEKIVATI.....	6
PRIJE VAŠEG PRVOG TRETMANA.....	6
PRIJE SVAKOG TRETMANA.....	7
KAKO TRETIRATI.....	8
ODRŽAVANJE VAŠEG TRIA LASERA.....	9
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	10


### Čestitke na vašem NOVOM TRIA LASERU


Tria Laser za uklanjanje dlačica daje Vam trajne rezultate kod kuće, za razliku od privremenih rješenja poput brijanja i depilacije voskom. Tria Laser radi na isti način kao i profesionalni laser za uklanjanje dlačica. On tretira folikulu dlake, a ne samo dlaku, pružajući vam trajno smanjivanje dlačica nakon serije tretmana.

## UVOD

**KAKO FUNKCIONIŠE laser za uklanjanje dlačica?** Tria Laser deaktivira folikule u vašoj koži koje proizvode dlačice. On emituje impuls laserskog svjetla, koji zagrijava tamni pigment unutar dlake i deaktivira folikulu dlake. Zbog toga on može donijeti trajne rezultate i funkcionira samo na prirodnim smeđim ili crnim dlačicama. Da bi bio najefikasniji, Tria Laser treba tretirati svaku folikulu dlake tokom njenog aktivnog rasta. Dlaka raste u ciklusima, tako da su višestruki tretmani neophodni. Za najbolje rezultate tretirajte ih svake dvije nedjelje tokom 3 mjeseca ili dok ne budete zadovoljni količinom smanjenja dlačica.

## UPOZNAVANJE SA VAŠIM TRIA LASEROM

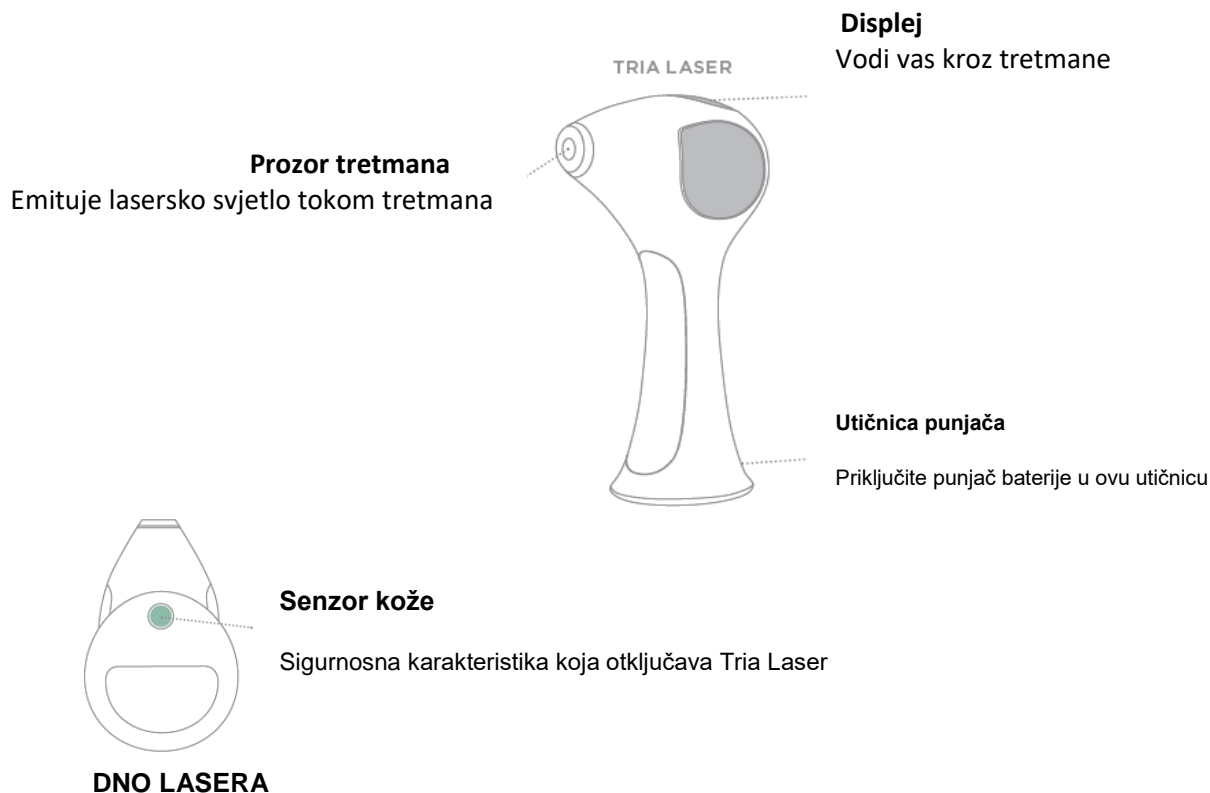

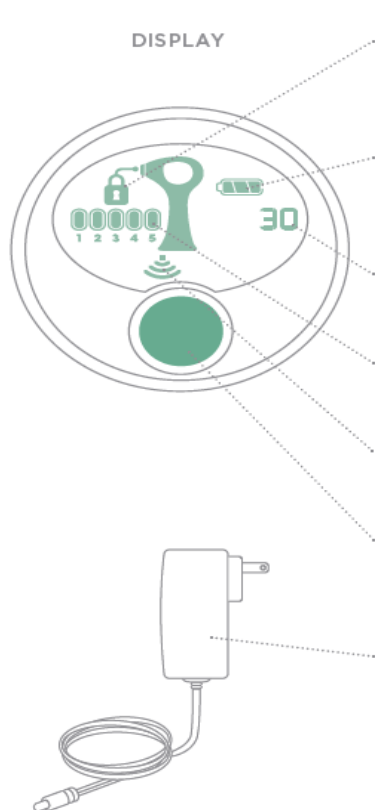

### ZAKLJUČAVANJE ( KLJUČ)

Tria Laser će se zaključati kada se ne koristi.

Otključajte ga senzorom za kožu.

### INDIKATOR BATERIJE

Ovo svjetlo ukazuje na punjenje baterije. Treperiti će kada je baterija niska i treba da se napuni.

### BROJAČ IMPULSA

Broji broj impulsa u sesiji tretmana.

### NIVO TRETMANA

Podšavanje energije Tria lasera.

### INDIKATOR SENZORA KOŽE

Ovo svjetlo pokazuje da je senzor za kožu spreman za upotrebu.

### DUGME ZA UKLJUČIVANJE

Podšava nivo tretmana, uključuje i isključuje Tria Laser.

### PUNJAČ BATERIJE

Puni Tria Laser. Tria Laser neće raditi dok je priključen.

## ZA ŠTA SE KORISTI TRIA LASER (INDIKACIJE)

Tria laser za uklanjanje dlačica koristi se za uklanjanje neželjenih dlačica. To je sistem u slobodnoj prodaji namijenjen za dodatnu upotrebu sa uklanjanjem dlačica brijanjem, kontinuirano u periodičnim tretmanima. Također je namijenjen za trajno smanjenje ponovnog rasta dlačica, definisano kao dugoročno, stabilno smanjenje u broju dlačica u ponovnom rastu kada se mjeri do 6,9 i 12 mjeseci nakon završetka režima tretmana. Namijenjen je za upotrebu samo na svijetloj do srednjoj nijansi kože (pogledajte Tabelu nijansi boje kože) i na prirodno smeđim ili crnim dlačicama. Neće imati efekta na bijelim, sivim, plavim ili crvenim dlačicama.

### KO NE SMIJE DA UPOTREBLJAVA TRIA LASER (KONTRAIKACIJE)

NE koristite Tria laser na vašoj koži, ako vaš ton kože odgovara onom navedenom pod "Nije bezbjedno". ( tabela nijansi boje kože na prvoj stranici ovog uputstva). Ako koristite Tria Laser na koži "Nije bezbjedno" za tretman, koža može da apsorbuje previše svjetla i da bude povrijeđena (spaljena, da izbljedi ili da nastanu ožiljci).


**NAPOMENA:** Senzor za kožu je sigurnosna karakteristika koji otključava Tria Laser. Ako nije bezbjedno za vas da koristite Tria Laser, nećete moći da ga otključate sa senzorom kože.


**NE KORISTITE** Tria laser ako imate ispod 18 godina ili ga također ne koristite na osobama ispod 18 godina. Upotreba Tria Lasera na djeci ili od strane djece nije proučeno i moglo bi rezultirati ozbiljnim povredma.


**NE KORISTITE** Tria laser ako imate svijetliju boju dlake, kao što je plava, bijela, crvena ili siva. Da bi laser mogao da radi, morate imati prirodno tamnu dlaku, na području koje tretirate. Svijetliji pigmenti dlake neće apsorbovati dovoljno energije lasera za onemogućavanje folikule dlake.


## UPOZORENJA


⚠ NE koristite Tria laser na ili oko očiju, obrva ili trepavica. To može prouzrokovati trajnu povredu oka.


 **NE** koristite Tria laser ako tabela nijansi kože pokazuje da vaš ton kože nije pogodan. Ako imate afričko, indijsko, izvorno američko ili pacifičko otočno naslijeđe, možda imate ton kože koji nije pogodan - provjerite tabelu nijansi boje kože. Tamniji tonovi kože mogu apsorbirati previše laserske svjetlosti, što može povrijediti kožu.


 **NE** koristite Tria Laser bilo gdje na ušima, bradavicama, genitalijama ili oko anusa. Ova područja mogu imati osjetljiviju kožu, tamniji ton kože i/ili veću gustinu dlake i upotreba Tria lasera može izazvati ozbiljne povrede kože.


 **NE** koristite Tria Laser na dijelovima vaše kože koji su tamniji od vašeg uobičajenog tona kože: tetovaže, tamno smeđe ili crne mrlje (kao što su velike pjege, mladeži ili benovi) ili na koži koja je crvena ili otečena od prethodnog tretmana. Tamna koža može da apsorbira previše laserskog svjetla, što može oštetiti kožu.


 **NEMOJTE** koristiti Tria laser na muškom licu, vilici ili vratu. Dlake na području muške brade su previše guste i upotreba Tria lasera u ovim područjima može rezultirati povredom kože. Uklanjanje dlaka pomoću lasera može uzrokovati povećan rast dlake kod nekih pojedinaca. Zasnivano na trenutno dostupnim podacima, grupe najvišeg rizika za ovakvu reakciju su ženske osobe Sredozemlja, srednjeistočnog i južnoazijskog naslijeđa, tretirane na licu i vratu.


 **NE** koristite Tria Laser na oštećenju kože, uključujući otvorene rane, ozeblina, opekotine od sunca ili na područjima na kojima ste imali piling kože ili drugi ponavljajući proces na koži u posljednjih 6-8 sedmica (provjerite kod svog doktora). Ova stanja mogu učiniti kožu podložnijom povredama.


 **NE** koristite Tria laser ako ste trudni ili ste dojilja. Tria Laser nije testiran na trudnicama. Hormonalne promjene mogu povećati osjetljivost kože i rizik od povrede kože.


 **NE** koristite Tria Laser ako izgleda oštećen, i nemojte pokušavati da otvorite ili popravite Tria laser. Ove radnje povećavaju rizik od povrede kože ili očiju. Molimo kontaktirajte Službu za korisnike za pomoć. Uvijek pratite osnovne mjere predostrožnosti za električne uređaje:


 **NEMOJTE** da Tria Laser ili punjač budu vlažni ili mokri.


 **NE** koristite Tria Laser dok se kupate ili nemojte da ga stavite pored kade ili umivaonika.

 **NEMOJTE** rukovati sa punjačem, oštećenim utikačem ili kablom. **UVIJEK** držite kabal daleko od zagrijanih površina. Nepoštivanje ovih mjera predostrožnosti može prouzrokovati električni udar ili električni šok.


 **Nemojte** koristiti Tria Laser za bilo koju drugu svrhu, osim za uklanjanje dlačica.


 Tria Laser je za ličnu upotrebu. Tria Laser nije za upotrebu u medicinskoj ordinaciji, klinici, salonu ili drugom komercijalnom ambijentu.


 **NE** koristite Tria laser na bilo kojem području na kojem možete poželjeti da vam opet narastu dlačice. Rezultati mogu biti trajni i nepovratni.

 Nevidljiva laserska zračenja.

Ne gledajte direktno sa optičkim instrumentima. Laserski proizvod klase 1.

 Gledanje laserskog izlaza sa određenim optičkim instrumentima (na primjer, lupa, povećalo, mikroskop) na udaljenosti od 100 mm može predstavljati opasnost za oko.

 Nije dozvoljena nikakva modifikacija ove opreme.

 Ovaj uređaj koristi RF energiju samo za svoju unutrašnju funkciju. Stoga, RF emisije su veoma niske i vjerovatno neće uzrokovati smetnje u blizini elektronske opreme.

## **PREDNOSTI I RIZICI**

Pokazala je medicinska nadgledana klinička studija da je Tria Laser bezbjedan i da funkcioniše kada se koristi kako je navedeno u uputama.

Sedamdeset devet (79) korisnika izvršilo je 6-sto nedjeljni kurs tretmana (3 tretmana) i proučavane su sve nuspojave. Broj dlačica na svakom području tretmana je izbrojan prije svakog tretmana i na 1, 2, 3, 6 i 12 mjeseci poslije posljednjeg tretmana. Nisu izvedeni dodatni tretmani nakon trećeg tretmana.

### **PREDNOSTI**

Kada se koristi u skladu sa uputstvima, Tria Laser daje trajne rezultate. Rezultati se razlikuju od osobe do osobe i zavise od toga koja je oblast tijela tretirana i koliko precizno se prate uputstva za tretman. Klinička studija je pokazala slijedeće prednosti:

- 61% prosječno smanjenje broja dlačica 3 nedjelje nakon prvog tretmana
- 70% prosječno smanjenje broja dlačica 3 nedjelje nakon drugog tretmana
- 60% prosječno smanjenje broja dlačica 1 mjesec nakon trećeg tretmana
- 33% prosječno smanjenje broja dlačica 12 mjeseci nakon trećeg tretmana

U studiji, 69 od 79 korisnika (87%) je prijavilo tanje dlačice na 1 mjesec nakon posljednjeg tretmana, prije bilo kakvog drugog tretmana. I 55 od 79 korisnika (70%) prijavilo je svijetlije dlačice na 1 mjesec nakon posljednjeg tretmana prije bilo kakvog drugog tretmana. Ovi rezultati su dobijeni samo sa 3 tretmana. Za najbolje rezultate tretirajte svake 2 nedjelje u trajanju od 3 mjeseca ili dok ne budete zadovoljni količinom smanjenja dlake.

### **RIZICI**

Važno je koristiti Tria Laser ispravno. Uvjerite se da razumijete i pratite sva upozorenja (pogledajte strane 3-5). Senzor kože će spriječiti upotrebu uređaja na kontraindikovanim tipovima kože (vidi stranu 3).

Ako koristite Tria Laser prema uputstvu, rizici su niski:

- U kliničkoj studiji skoro svi korisnici prijavili su blagi do umjereni bol ili nelagodnost tokom njihovog prvog tretmana, sa smanjenom osjetljivošću prijavljenoj u njihovim kasnijim tretmanima. Ovo je uobičajeno. Možda ćete osjećati toplinu, zapaljenje, peckanje ili svrab; neki korisnici su opisali osjećaj na istom nivou neugodnosti kao da se gumenom trakom pucketa po koži. Ako je bol previše intenzivan ili ostane takav poslije tretmana, prestanite koristiti Tria Laser i provjerite sa svojim ljekarom prije nego što ga ponovo upotrijebite.
- Vaša koža može postati crvena odmah nakon tretmana ili u roku od 24 sata. Ovo crvenilo uglavnom nestaje u roku od nekoliko sati. Konsultujte svog doktora ako crvenilo ne nestaje u roku od 2-3 dana.
- U rijetkim slučajevima, neki korisnici mogu vidjeti povećanje broja dlaka u tretiranoj oblasti poslije početnog tretmana. Ako se ovo povećanje nastavi nakon nekoliko tretmana, prestanite koristiti Tria Laser i konsultujte svog doktora. Slijedeći simptomi nisu pogađali korisnike u kliničkoj studiji (0 od 88), ali je bilo prijavljenih sa drugim laserima za uklanjanje dlačica:
- Otok kože, posebno oko folikule dlake.

Ako oticanje ne nestane u roku od 2-3 dana, prestanite koristiti Tria Laser i obratite se svom ljekaru.

- Privremena ili trajna promjena boje kože.

Ako se boja kože promijeni, prestanite da koristite Tria Laser i posjetite svog liječnika.

- Plikovi. Ovo je vrlo malo vjerovatno za ljude sa svijetlim ili srednjim tonom kože. Ako se razvije plik, prestanite koristiti Tria Laser i nemojte pustiti da se plik inficira. Konsultujte vašeg doktora ako je potrebno.

## **PREGLED TRIA LASER TRETMANA**

### **PRIJE VAŠEG PRVOG TRETMANA**

- 6 sedmica prije vašeg tretmana, prestanite sa depilacijom voskom ili čupanjem dlačica i nemojte praviti piling kože.

- Najmanje 1 dan prije tretmana, izvedite test na malom području kože ( pogledajte stranu 7 )

### **PRIJE SVAKOG TRETMANA**

- Napunite svoj Tria Laser (pogledajte stranu 6).
- Isključite ga iz punjača baterije.
- Očistite, obrijite i posušite kožu ( pogledajte stranu 7 ).
- Uključite Tria Laser (pogledajte stranu 7).
- Otključajte ga sa senzorom za kožu ( pogledajte stranu 7 ).
- Podesite nivo tretmana (pogledajte stranu 8).

### **IZMEĐU TRETMANA**

- Brijte, ali nemojte depilirati voskom ili čupati dlačice.

### **TRETIRAJTE dok ne završite**

- Budite dosljedni i pratite uputstva za tretman.
- Za najbolje rezultate tretirajte svake dvije nedjelje tokom 3 mjeseca ili dok ne vidite željene rezultate.

## **ŠTA OČEKIVATI?**

### **TOKOM UPOTREBE TRIA LASERA**

- Senzacija se razlikuje, u zavisnosti od osobe, područja tretmana i nivoa tretmana. Neki korisnici mogu osjetiti senzaciju gumene trake koja pucketa po koži. Drugi će osjećati toplu, peckajuću senzaciju. • Kako se količina dlačica u tretiranim područjima smanjuje, tako će se također senzacija smanjivati. Iz tog razloga, možda ćete moći da koristite viši nivo tretmana nakon početnih tretmana. • Neki korisnici imaju blago crvenilo u roku od 24 sata.

### **TOKOM VAŠA PRVA 3 MJESECA TRETMANA**

- Nakon prvog tretmana, neće biti vidljive promjene na dlačicama. Lasersko uklanjanje dlačica ne uzrokuje da dlačice odmah otpadnu. • Uz dodatne tretmane, sa svakim tretmanom nastajati će postepeno smanjivanje broja dlačica. • Dlačice koje ponovo rastu također će početi da budu svijetlije i postaću tanje.


### **POSLIJE 3 MJESECA TRETMANA**

- Folikule dlačica koje su deaktivirane Tria laserom neće se vratiti ponovo.
- Ponekad dotjerajte ili napravite dodatne tretmane ako je potrebno.

### **PRIJE VAŠEG PRVOG TRETMANA**

#### **NAPUNITE TRIA LASER**

Napunite Tria Laser najmanje 2 sata ranije prije upotrebe ili onda kada je indikator baterije "prazan" i treperi. Ako obuhvatate velike površine ili ste podesili Tria laser set na visok nivo energije, možda ćete trebati da napunite Tria laser tokom tretmana (u sredini tretmana). Ovo je uobičajeno.

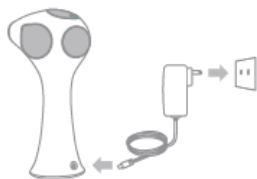

#### **ZA PUNJENJE:**

1. Uključite punjač baterije u Tria Laser utičnicu punjača i u utičnicu za struju.
2. Indikator baterije pokazuje da se "punji", dok se Tria Laser puni.
3. Kada se potpuno napuni, lampica baterije će ostati uključena i možete isključiti punjač. Tria Laser može ostati uključen duži vremenski period bez oštećenja.


**NAPOMENA:** Da biste spriječili oštećenje vašeg Tria Lasera, koristite samo uključeni Tria punjač baterije. Ako izgubite punjač, molimo kontaktirajte korisnički servis.

**NAPOMENA:** Laser možete puniti u tihom režimu- Quiet mode (punjenje bez zvuka ventilatora za hlađenje), ali to će trajati duže. Da biste promijenili režime punjenja, pritisnite i zadržite Power dugme ( dugme za uključivanje) tokom punjenja, dok ne čujete ton.

#### **TESTIRAJTE LASER NA MALOM PODRUČJU KOŽE**

Prije prvog potpunog tretmana na novom području vašeg tijela, preporučujemo Vam da testirate Tria laser na malom području kože i isprobate različite nivoe energije.

1. Pripremite vašu kožu i otključajte Tria Laser (pogledajte stranu 7). Tria Laser će biti podešen na Level 1 ( Nivo 1)).
2. Postavite prozor tretmana ravno na vašu kožu, i testirajte jedan laserski impuls.
3. Ako je Level 1 podnošljiv za vas, onda se pomjerite do slijedećeg testirajućeg područja i povećajte na Level 2 ( Nivo 2), testirajući područje kože na tom nivou sa jednim laserskim impulsom. Da biste prilagodili Tria laser podešavanje gore ili dole, pritisnite dugme za uključivanje ( pogledajte stranu 8)
4. Ako je Level 2 podnošljiv za vas, promijenite testirajuća mjesta i povećajte za jedan nivo dok ne nađete najvišu postavku koja je i dalje podnošljiva. Tretiranje na najvišem mogućem nivou će učiniti rezultate maksimalnim.
5. Sačekajte 24 sata, a zatim pregledajte područja testiranja. Ako koža izgleda uobičajeno, započnite svoj prvi tretman na najvišem nivou koji vam je ugodan. Ponovite test na koži ukoliko se ton kože dramatično promijeni (zbog tamnjenja).

 Ukoliko primjetite plikove, opekotine, promjene u tonu kože ili bilo koji drugi neželjeni efekat, ili ako niste sigurni u ishod testa, ne koristite Tria Laser. Kontaktirajte korisnički servis ili vašeg doktora.

#### **PRIJE SVAKOG TRETMANA**

##### **PRIPREMITE VAŠU KOŽU**

1. Očistite područje tretiranja, uklonite sve kozmetičke preparate, losione i kreme koje mogu blokirati lasersko svjetlo.
2. Obrijte područje tretmana. Ovo uklanja površinske dlačice, što poboljšava udobnost i dozvoljava svjetlu da bolje dođe do folikule dlake.
3. Osušite područje tretmana

#### **OTKLJUČAVANJE LASERA**

Tria Laser će se zaključati kada nije u upotrebi. Da biste otključali Tria Laser koristite senzor za kožu, koji pomaže da potvrdite da je Tria laser bezbjedan za vašu nijansu kože.


Da biste otključali:

1. Isključite Tria laser iz punjača za bateriju i pritisnite dugme za uključivanje da biste ga uključili. Displej će pokazati simbol ključa i simbol senzora kože.
2. Držite senzor za kožu (crveno svjetlo na dnu Tria lasera) na području kože koje želite tretirati. Senzor kože će automatski osjetiti i pregledati vašu kožu. Ako je Tria laser bezbjedan za vašu nijansu kože, Tria laser će ispuštati seriju zvučnih signala i otključati se.
3. Ako je simbol zaključavanja ( ključ) još vidljiv i ne čujete seriju zvučnih signala, onda možda nije bezbjedno za vas da koristite Tria laser. Ili, možda koristite senzor kože nepravilno i trebate pokušati ponovo. Da biste pokušali ponovo, podignite senzor kože sa vaše kože i slijedite Korake 1 i 2 gore navedene. Ako još uvijek ne možete otključati Tria laser, molimo kontaktirajte korisnički servis za pomoć.

##### **Postavite nivo tretmana**

Tria Laser ima različite nivoe energije.

U kliničkoj studiji nađeno je da su viši nivoi 2-3 puta efikasniji. **Dakle, za najbolje rezultate, preporučujemo vam da koristite najviše postavke koje možete podnijeti.** Kada je Tria laser uključen i otključan, pritisnite dugme za uključivanje ( power dugme) da biste izabrali željeni nivo. Svaki put kada pritisnete dugme za uključivanje, nivo će se povećati. Kada je Tria Laser na maksimalnom nivou, pritisak na dugme za uključivanje ponovo će ga vratiti na najniži nivo.

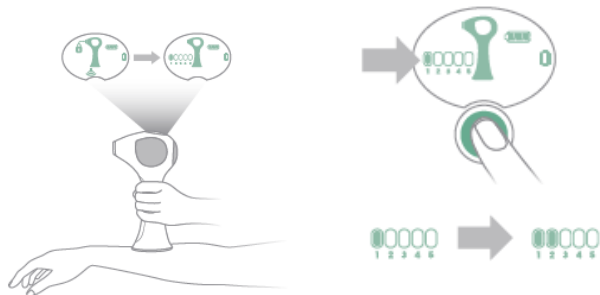

## KAKO TRETIRATI

**1. UKLJUČITE LASER, OTKLJUČAJTE GA I PODESITE NIVO TRETMANA** (pogledajte stranu 8)

**2. DOTAKNITE I DRŽITE PROZOR TRETMANA NA KOŽI DOK NE ČUJETE DVA ZVUČNA SIGNALA**

- Ako ne čujete zvučne signale, uvjerite se da je prozor tretmana ravno postavljen na vašoj koži. Laser će pulsirati samo kada cijeli prozor dodiruje vašu kožu.
- Ako čujete ton zujanja umjesto drugog zvučnog signala, podigli ste uređaj sa kože prije nego što je završen impuls.
- Ne pomjerajte prozor za tretman između prvog i drugog zvučnog signala, zato što ovo može ometati laserski impuls i smanjiti njegovu efikasnost.

**3. PODIGNITE LASER I STAVITE GA NATRAG NA KOŽU TAKO DA PREKLAPA PRETHODNU TAČKU**

- Svaki put kada premještate prozor tretmana, pomjerite ga oko polovine udaljenosti prozora (oko 1/4 inča ili 5 mm). Ovo stvara preklapajući uzorak u području tretmana, što vam osigurava da pokrijete sve folikule dlačica. Ovo funkcionira do oko 25 laserskih impulsa po kvadratnom inču ili 40 impulsa po 10 kvadratnih centimetara.

**⚠ NE** ponavljajte tretiranje više puta na istom mjestu. Uvijek pomjerajte prozor tretmana na novo područje nakon svakog laserskog impulsa. Nepostupanje po istom, može rezultirati neugodnošću ili zagrijavanjem kože, što bi moglo prouzrokovati povrede kože.



**4. NASTAVITE SA RADOM DOK NE OBUHVATITE PODRUČJE KOJE ŽELITE TRETIRATI U POTPUNOSTI**

Koristite Tria Laser Pulse Counter kako biste dobili najbolje rezultate. Pogledajte tabelu ispod kao vodič koliko impulsa vam je potrebno za pokrivanje svakog područja tretmana. Broj impulsa i vremena su približni - vaše stvarno područje tretmana i broj impulsa mogu varirati. Uvijek pratite uputstva za tretiranje i upozorenja sadržana u ovim uputama.



**NAPOMENA:** Kada tretirate veće površine poput nogu i leđa, možda će vam trebati više od 600 impulsa za pokrivanje područja koristeći preklapajući obrazac. Ako je tako, molimo, ponovo napunite Tria Laser i nastavite sa tretiranjem dok niste prekrili željeno područje tretmana.

### Vodič za broj impulsa

Dio tijela	Približno impulsa za tretman	Približno minuta
Pazuh	100 po strani	4-5 po strani
Bikini	200 po strani	8-10 po strani
Gornja usna	25	2-3
Butine	600 po strani	25-30 po strani
Potkoljenica	600 po strani	25-30 po strani

Broj impulsa i vrijeme su približni

### 5. ISKLJUČITE LASER DRŽEĆI PRITISNUTO DUGME ZA UKLJUČIVANJE ( power dugme)

Ponovite tretman svake 2 nedjelje do 3 mjeseca ili dok ne dostignete željene rezultate.

**NAPOMENA:** Ventilator za hlađenje može se uključiti i isključiti tokom vašeg tretmana. Ovo je uobičajeno i ništa ne brinite.

### ODRŽAVANJE TRIA LASERA

Tria Laser ne zahtijeva posebno održavanje, ali mi preporučujemo da ga održavate čistim, naročito prozor tretmana i senzor za kožu.

#### UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Uvjerite se da je Tria Laser isključen i odspojen punjač baterije iz Tria laserske utičnice za napajanje.
- Da biste očistili Tria Laser i punjač baterije, navlažite meku krpu vodom i blagim rastvorom sapuna, i obrišite prozor tretmana i vanjštinu uređaja. Pazite da ne oštetite prozor tretmana. Pustite da se Tria Laser potpuno osuši prije punjenja ili uključivanja.
- Očistite nježno senzor za kožu koji se nalazi u osnovi Tria Lasera, suhom krpom bez vlakana.



Nemojte da Tria Laser ili punjač baterije bude vlažan ili mokar. Ako postanu vlažni, **NEMOJTE** koristiti Tria Laser ili punjač baterije.

Kontaktirajte korisnički servis. Obavljanje tretmana sa vlažnim Tria laserom ( ili dijelom) može izazvati električni udar ili električni šok.

#### DUGOROČNO SKLADIŠTENJE

Ako ne planirate da koristite ovaj uređaj duži vremenski period, preporučujemo Vam da ponovo napunite uređaj svaka 3 mjeseca da biste održali upotrebnost vijek baterije.

### RECIKLIRANJE / ODLAGANJE

Tria Laser sadrži litijumske baterije koje se ne mogu zamijeniti. Da reciklirate ili odložite, molim vas pratite propise mjesta u kojem živite ili kontaktirajte korisnički servis za informacije.

### Rješavanje problema

Molimo kontaktirajte korisnički servis za dodatnu pomoć.

VAŠE PITANJE	MOGUĆE JE DA	KAKO OTKLONITI SMETNJU
Moj Tria laser se ne uključuje.	Vaš Tria laser nije napunjen.	Napunite Vaš Tria laser ( vidi stranu 6)

Dok punim moj Tria laser, indikator baterije na displeju „ne puni se“.	Vaš Tria laser nije ispravno spojen.	Potvrdite da je Vaš Tria laser čvrsto uključen u punjač i u zidnu utičnicu.
	Vaš Tria laser je već napunjen u potpunosti i spreman za upotrebu.	Isključite punjač baterije iz zidne utičnice i iz Tria lasera.
Iako napunim moj Tria laser, indikator baterije još se uvijek „puni“.	Vaš Tria laser nije napunjen u potpunosti.	Napunite Vaš Tria laser ( vidi stranu 6)
Kada stavim Tria laser na moju kožu, ništa se ne dešava.	Vaš Tria laser je zaključan.	Tria laser će se zaključati kada nije u upotrebi. Otključajte Tria Laser sa senzorom kože(vidi stranu 7)
Kada stavim Tria laser na moju kožu, ništa se ne dešava.	Vaš Tria laser je uključen u punjač baterije.	Tria laser neće raditi kada je uključen u punjač baterije. Isključite vaš Tria laser.
	Prozor tretmana nije u potpunosti u kontaktu sa vašom kožom.	Potvrdite da je prozor tretmana u potpunosti postavljen ravno na vašu kožu.
Kada stavim Tria laser na moju kožu, ništa se ne dešava.	Područje koje pokušavate tretirati je premalo, zakrivljeno ili koščato za tretiranje.	Pokušajte ponovo, i zategnite kožu. Ako ne možete postaviti prozor tretmana da dodiruje područje tretmana, onda Tria laser neće raditi.
Ne mogu koristiti Tria laser i slika „ključ“ prikazuje se na prozoru.	Vaš Tria laser je zaključan.	Tria laser će se zaključati kada nije u upotrebi. Otključajte Tria laser sa senzorom kože ( vidi sliku 7)
Displej treperi brzo.	Vaš Tria laser ispravno ne funkcioniра.	Molimo kontaktirajte korisnički servis za pomoć.
Priljavština ili ostaci su se zaglavili na prozoru tretmana.	Tria laser treba očistiti.	Pogledajte upute o čišćenju na strani 9. Ako ne možete dosegnuti da očistite područje, kontaktirajte korisnički servis za pomoć.
Pokušala sam da otključam Tria laser, ali je još uvijek zaključan.	Možda nije bezbjedno za Vas da koristite Tria laser.	Uporedite Vašu nijansu kože sa Tabelom nijansi boje kože u ovim uputama, i kontaktirajte korisnički servis ako imate bilo kakvih pitanja.
	Niste koristili ispravno senzor kože.	Pokušajte ponovo, držeći senzor kože ravnim i čvrstim na Vašoj koži ( vidi sliku 7)
Kada premjestim Tria laser, čini se da dugo treba	Prostorija je topla. Tria laser može pulsirati slabije u toplom okruženju.	Koristite Tria laser u hladnijem okruženju.

vremena prije nego što dođe slijedeći laserski impuls.		
Moj Tria laser je radio ispravno, ali je onda prestao da radi. Displej je isključen i ne uključuje se i kada pritisnem dugme za uključivanje.	Bateriju treba napuniti.	Napunite Tria laser ( vidi stranu 6)
Kada koristim Tria laser, čujem da radi ventilator.	Ovo je uobičajeno.	Nastavite Vaš tretman.

### Tehničke specifikacije:

TIP LASERA: Diodni laser

KLASA LASER: 1

IZLAZNA talasna dužina: 810 nm

IZLAZNA FLUENCA: 7-22 J / cm<sup>2</sup>

ULAZ PUNJAČA BATERIJE: 100-240 V ~, 50 / 60Hz, 37 VA

IZLAZ PUNJAČA BATERIJE: 5,0 V DC, 3,0 A / 2,3 A

OČEKIVAN SERVISNI ŽIVOT: 3 godine minimum

RADNA TEMPERATURA: 5 ° C do 30 ° C

RADNA RELATIVNA VLAŽNOST: Bez kondenzacije 15-85%

RADNI ATMOSFERSKI PRITISAK: 700 hPa do 1060 hPa

TRANSPORT I TEMPERATURE SKLADIŠTENJA: -20 ° C do 50 ° C

TRANSPORTNA RELATIVNA VLAŽNOST: Bez kondenzacije 0-93%

### SIMBOLI



Znak upozorenja



Znak laserskog upozorenja



WEEE



Tip BF



Serijski broj

CE oznaka



Simbol datuma proizvodnje



Simbol proizvođača



Simbol ograničenja temperature



Prateće upute



Oprema Klasa II



Čuvajte suhim