

Beurer HK 115

Električni jastuci

Uputstvo za upotrebu

Opis simbola



	Pročitati napomene!		Prati na programu za osjetljivu odjeću na temperaturi od 30°
			Ne smije se izbjeljivati
	Ni slučajno stavljati igle ili oštre predmete!		Ne smije se sušiti u sušilici
			Ne smije se peglati
	Ni slučajno koristiti u savijenom stanju!		Ne smije se čistiti hemijskih sredstvima
	Ne smiju koristiti jako mala djeca (0-3 godine)		Materijali korišteni u ovom uređaju zadovoljavaju visoke ekološke zahtjeve Öko-Tex standarda 100, što je dokazano u istraživačkom institutu Hohenstein.
	UPOZORENJE: Upozorenje na opasnosti od povreda ili opasnosti po Vaše zdravlje.		
	PAŽNJA: Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru.		
	NAPOMENA: Napomena o važnim informacijama.		

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujuete upozorenja.


Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

1. Obim isporuke

- 1 električni jastuk
- 1 prevlaka
- 1 šalter
- 1 uputstvo za upotrebu

1.1 Opis uređaja

- 1 mrežni priključak
- 2 šalter
- 3 klizni prekidač (EIN (on)=I / AUS (off)=0)
- 4 tipke za podešavanje temperature
- 5 osvijetljen prikaz temperaturnih nivoa
- 6 utično spajanje

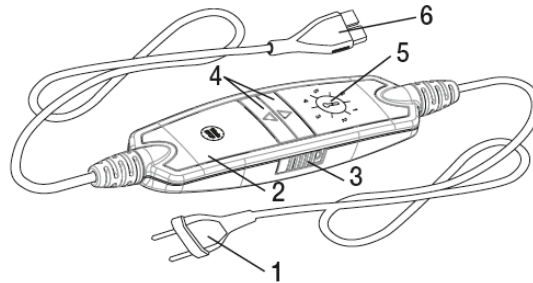

2. Važne sigurnosne napomene – pažljivo pročitati i sačuvati za kasniju u potrebu

UPOZORENJE

- Nepoštivanje slijedećih napomena može prouzrokovati ozljede ili oštećenja na uređaju (strujni udar, opekotine, požar). Slijedeće sigurnosne napomene i upozorenja od opasnosti služe ne samo zaštiti Vašeg zdravlja odnosno zdravlja trećih, već i zaštiti proizvođača. Zbog toga poštujujte sigurnosne napomene.
- Ovaj električni jastuk ne smiju koristiti osobe koje su neosjetljive na toplotu i druge osobe kojima je potreba zaštita i koje ne reaguju na pregrijavanje.
- Ovaj električni jastuk ne smiju koristiti jako mala djeca (0-3 godine) pošto ista ne mogu da reaguju na pregrijavanje.
- Ovaj električni jastuk ne smiju koristiti djeca (3-8 godina) osim ako je temperaturu podesio jedan od roditelja ili druga osoba zadužena za njihov nadzor i ako su djetetu date jasne i iscrpne upute kako da sigurno koristi jastuk.
- Električni jastuk smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i/ili znanja samo ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.
- Djeca ne smiju čistiti ovaj uređaj bez nadzora.
- Električni jastuk nije namijenjen za korištenje u bolnicama.
- Nemojte stavljati igle u uređaj.
- Uređaj nemojte koristiti u savijenom stanju.
- Uređaj nemojte koristiti kada je mokar.
- Ovaj električni jastuk koristite samo sa šalterom koji je naveden na etiketi.
- Električna i magnetna polja, koja proizilaze iz ovog proizvoda, mogu ometati rad Vašeg pejsmejkera. Ali vrijednosti ovih polja su daleko ispod graničnih vrijednosti: snaga električnog polja: max. 5000 V/m, snaga magnetskog polja: max. 80 A/m, gustoća magnetskog toka: maksimalno 0.1 mili -Tesla. Stoga se prije korištenja ovog proizvoda obratite svom doktoru ili proizvođaču.
- Nemojte vući za kabal ili ga savijati.
- Električni jastuk trebate provjeriti na moguća oštećenja ili istrošenost. Ukoliko pronađete oštećenja ili je ovaj uređaj korišten nepropisno, onda ga prije ponovne upotrebe trebate odnijeti proizvođaču ili ovlaštenom trgovcu.
- Ako je oštećen kabal ovog uređaja, isti smije zamijeniti samo proizvođač ili stručna služba proizvođača kako bi se izbjegle opasnosti.
- Dok je ovaj električni jastuk upaljen
 - nemojte stavljati predmete (npr. kofer ili korpu za prljav veš) na isti,
 - nemojte stavljati izvore toplote na isti kao što su termofor, električni jastuk ili slično.
- Električni dijelovi u šalteru ovog jastuka blago zagrijevaju šalter za vrijeme rada. Zbog toga, šalter ne smije biti prekriven ili postavljen na jastuk kada je uključen.
- Obavezno poštujujte napomene o rukovanju (poglavlje 4), o čišćenju i održavanju (poglavlje 5) i čuvanju (poglavlje 6).
- Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za korištenje ovog uređaja, molimo da se obratite našem servisu za kupce ili ovlaštenom trgovcu.

3. Upotreba prema svrsi namjene

PAŽNJA

Ovaj električni jastuk namijenjen je za zagrijavanje ljudskog tijela.

4. Rukovanje

4.1 Sigurnost

PAŽNJA


Ovaj električni jastuk ima SIGURNOSNI SISTEM. Ova elektronska senzor tehnologija sprječava pregrijavanje jastuka na cijeloj njegovoj površini i to putem automatskog isključivanja u slučaju neke greške. Ukoliko zbog greške dođe do automatskog isključivanja električnog jastuka, na prekidaču ne svijetli prikaz nivoa temperature čak i ako je jastuk uključen. Imajte na umu da nakon ovakvog slučaja električni jastuk iz sigurnosnih razloga ne možete upaliti i isti trebate odnijeti u servis za kupce ili kod ovlaštenog trgovca.

4.2 Rad

PAŽNJA


Provjerite da se električni jastuk za vrijeme rada ne savije ili stvori nabore.

- Ponajprije spojite šalter spojen sa jastukom preko utičnog spajanja.
- Sada utikač uključite u struju.

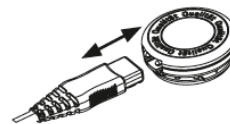

4.3 Dodatne napomene o HK 58 Cosy

Poseban oblik ovog jastuka razvijen je posebno za područje leđa i vrata. Električni jastuk postavite tako na leđa da čičak bude oko područja vrata. Nakon toga zalijepite čičak. Sada podesite dužinu pojasa oko stomaka i zatvorite ga. Za otvaranje pojasa oko stomaka, istovremeno pritisite na bočne strane zakačke

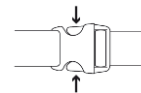

4.4 Paljenje

Klizni prekidač (3) na desnoj strani šaltera postavite na nivo „I“ (ON) – vidi sliku šaltera. Prikaz temperaturnih novoa je osvijetljen kada je uređaj upaljen.

4.5 Podešavanje temperature

Za povećavanje temperature pritisnite Δ -tipka 4. Za smanjenje temperature pritisnite ∇ -tipka 4. Za dužu primjenu električnog jastuka bez pauza preporučujemo da podesite temperaturu na najniži nivo.

Nivo 1: minimalno zagrijavanje

Nivoi 2-5: individualno zagrijavanje

Nivo 6: maksimalno zagrijavanje



NAPOMENA

Najbrže zagrijavanje električnog jastuka postizete tako što podesite zagrijavanje na najvišu temperaturu.



NAPOMENA

Ovaj električni jastuk ima funkciju brzog zagrijavanja, koje omogućava brzo zagrijavanje u roku od prvih 10 minuta.



UPOZORENJE

Ukoliko električni jastuk koristite više sati, preporučujemo da isti podesite na najniži temperaturni nivo kako bi izbjegli pretjerano zagrijavanje (pregrijavanje) dijela tijela koji zagrijavate i kao posljedica toga nastajanje opekotina.

4.6 Automatsko isključivanje

Električni jastuk se automatski gasi nakon cca. 90 minuta. Prikaz nivoa temperature počinje da treperi. Kako bi ponovo upalili električni jastuk, ponajprije ugasi električni jastuk tako što klizni prekidač savite (3) stavite na nivo „0“ (OFF). Nakon 5 sekundi ponovo upalite jastuk.



4.7 Gašenje

Bočni klizni prekidač na šalteru stavite na nivo „0“ (OFF) kako bi ugasi električni jastuk. Tada prikaz nivoa temperature više ne svijetli.



NAPOMENA

Ukoliko se električni jastuk više ne koristi, tada bočni klizni prekidač stavite na poziciju „0“ (ON/OFF) i izvucite kabal iz utičnice. Nakon toga odvojite utično spajanje, a samim time i šalter od električnog jastuka.

5. Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE

Prije čišćenja električnog jastuka isključite utikač iz struje i odvojite utično spajanje iz jastuka.



PAŽNJA

• Šalter nikada ne smije doći u dodir sa vodom ili drugim tečnostima. U suprotnom bi se mogao oštetiti.

Za čišćenje šaltera koristite suhu krpu. Nemojte koristiti hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Tekstilnu prevlaku možete čistiti prema simbolima na etiketi i u tu svrhu je morati skinuti.

Manje mrlje možete očistiti krpom ili vlažnom spužvom sa eventualno nešto sredstva za čišćenje.



PAŽNJA

• Imajte na umu da sam jastuk ne smijete centrifugirati, sušiti u sušilici, čistiti u hemijskoj čistionici ili peglati.

Jastuk možete prati u mašini za veš. Jastuk perite na temperaturi od 30°C. Koristite blaga sredstva za pranje i ista dozirajte prema uputama proizvođača.



PAŽNJA

- Imajte na umu da se čestim pranjem jastuk troši. Zato preporučujemo da jastuk za cijelog njegovog vijeka trajanja perete maksimalno 10 puta u mašini za veš.

Nakon pranja vlažni jastuk raširite u njegov originalni oblik i postavite ga ravno na stalak za sušenje.



PAŽNJA

- Jastuk nemojte vješati na štrik da bi se osušio jer mi se mogao oštetiti.
- Ovaj električni jastuk koristite tek onda, kada se uvjerite da je u potpunosti suh.



UPOZORENJE

- Električni jastuk nemojte paliti da ga na taj način osušite! U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.

6. Čuvanje

Ako ovaj električni jastuk duže vrijeme ne koristite, preporučujemo da ga stavite u originalnu ambalažu i spremite je na suho mjesto.



PAŽNJA

Prije nego jastuk spremite, ostavite ga da se dobro ohladi. U suprotnom se može oštetiti. Nemojte stavljati predmete na jastuk.



7. Odlaganje

Molimo da uređaje odlažete u skladu sa Smjernicama za stare električne i elektronske uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

8. Šta poduzeti u slučaju problema?

Problem	Uzrok	Otklanjanje
Nivoi temperature nisu osvijetljeni <ul style="list-style-type: none"> - kada je šalter u potpunosti povezan sa električnim jastukom - kada je mrežni priključak priključen u ispravnu utičnicu - kada je bočni klizni prekidač postavljen na nivo „I“ (ON) 	Sigurnosni sistem je nepovratno isključio električni jastuk.	Električni jastuk vratite ovlaštenom trgovcu.

9. Tehnički podaci

Vidi tipsku pločicu na etiketi na električnom jastuku.