

# Beurer HK 48 Cosy Električni jastučić

Uputstvo za upotrebu



	Pročitajte napomene!		Prati na programu za blago pranje veša na temperaturi od 30°C
			Ne smije se izbjeljivati
	Ne stavljati igle ili oštre predmete u uređaj!		Ne sušiti u sušilici za rublje.
			Ne peglati
	Uređaj ne koristiti u savijenom stanju!		Ne čistiti u hemijskoj čistionici
			Ne prati
	Ne smiju koristiti jako mala djeca (0-3 godine).		Materijali korišteni u ovom uređaju zadovoljavaju stroge ekološke zahtjeve Öko-Tex standarda 100, što je dokazano u istraživačkom institutu Hohenstein.
	<b>UPOZORENJE;</b> Upozorenje na opasnosti od povreda ili opasnosti po vaše zdravlje.		
	<b>PAŽNJA;</b> Sigurnosne napomene an moguće štete na uređaju/priboru.		
	<b>NAPOMENA;</b> Napomena o važnim informacijama.		

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim


## 1. Obim isporuke:

1 električni jastučić  
1 unutrašnji jastučić

1 prekidač  
1 uputstvo za upotrebu

## 1.1 Opis uređaja

- 1 Utikač za struju
- 2 Kabal
- 3 Prekidač
- 4 Osvijetljen prikaz nivoa temperature
- 5 Klizni regulator za ON/OFF i nivo temperature
- 6 Priključak za uređaj
- 7 Navlaka sa integrisanim električnim jastučićem
- 8 Unutrašnji jastučić
- 9 Zatvarač

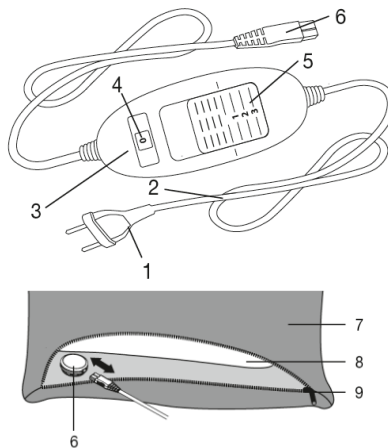

## 2. Važne upute

Sačuvati za kasniju upotrebu



### UPOZORENJE

- Nepoštivanje napomena u nastavku može prouzrokovati materijalne štete i ozlijede osoba (električni udar, opekotine, požar). Sigurnose napomene i napomene o opasnostima ne služe samo za zaštitu Vašeg zdravlja odnosno zdravlja trećih, već i za zaštitu proizvoda. Stoga poštujujte ove napomene i prosljedite ovo uputstvo ako uređaj date trećoj osobi.
- Ovaj električni jastučić ne smiju koristiti osobe koje su preosjetljive na toplotu, a posebno osobe kojima je potrebna zaštita i koje ne reaguju na pregrijavanje.
- Ovaj električni jastučić se ne smije primjenjivati na jako maloj djeci (0-3 godine), jer oni ne mogu da reaguju na pregrijavanje.
- Ovaj električni jastučić ne smiju koristiti mala djeca (3-8 godina), osim ako prekidač nije podesio jedan roditelj ili osoba zadužena za njihovu sigurnost i ako je dijete dobilo dovoljno uputa kako ovaj električni jastučić radi.
- Ovaj električni jastučić mogu koristiti starija djeca od 8 godina kao i osobe sa smanjenom psihičkom, osjetilnom ili mentalnom sposobnošću ili sa nedostatkom iskustva i znanja samo onda kada ih nadgleda osoba koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako su dobili upute od nje kako se koristi ovaj jastučić i koje sve opasnosti postoje.
- Djeca se ne smiju igrati ovim jastučićem.
- Čišćenje i održavanje ovog električnog jastučića ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
- Ovaj električni jastučić nije namijenjen zakorištenje u bolnicama.
- Nemojte stavljati igle u jastučić.
- Nemojte ga koristiti u savijenom stanju.
- Nemojte ga koristiti kada je mokar.
- Ovaj električni jastučić se smije uključivati samo na prekidač naveden na etiketi.
- Električna i magnetna polja koja proizilaze iz ovog električnog jastučića mogu pod određenim okolnostima ometati rad Vašeg pejsmejera. Međutim, njihove vrijednosti su daleko ispod graničnih vrijednosti: jačina električnog polja: maksimalno 5000 V/m, jačina magnetnog polja: maksimalno 80 A/m, gustoća magnetnog protoka: maksimalno 0,1 Mili-Tesla. Molimo da se prije korištenja ovog električnog jastučića ponajprije posavjetujete sa Vašim ljekarom ili proizvođačem pejsmejera.
- Nemojte vući za kabal. Isti nemojte zavrtati ili savijati.
- Ovaj električni jastučić treba pregledati da li ima znakove istrošenosti ili oštećenja. Ukoliko postoje ovi znakovi ili je električni jastučić korišten na nepropisan način ili više ne zagrijava, isti treba pregledati proizvođač prije ponovnog korištenja.
- Ukoliko je oštećen kabal ovog uređaja, isti treba zamijeniti proizvođač ili stručna osoba kako bi se spriječilo nastajanje oštećenja i opasnosti.
- Dok je električni jastučić upaljen nije dozvoljeno
  - stavljati bilo kakav predmet (npr. kofer ili korpu za veš) na njega,
  - stavljati izvor toplote kao što je termofor, električni jastučić ili slično stavljati na njega.
- Elektronski dijelovi u prekidaču se zagrijevaju kod upotrebe električnog jastučića. Stoga prekidač ne treba prekrivati ili stavljati na električni jastučić kada je isti upaljen.
- Molimo da obavezno poštujujte napomene za korištenje (poglavlje 4), za čišćenje i održavanje (poglavlje 5) i čuvanje (poglavlje 6).
- Ukoliko imate dodatnih pitanja o našim uređajima, molimo da se obratite našem ovlaštenom trgovcu.

## 3. Upotreba u skladu sa svrhom namjene



### PAŽNJA

Ovaj električni jastučić namijenjen je isključivo za zagrijavanje ljudskog tijela.

## 4. Rukovanje

### 4.1 Sigurnost




Ovaj električni pokrivač ima SIGURNOSNI SISTEM. Ova senzor tehnologija spriječava pregrijavanje uređaja na cijeloj njegovoj površini i to putem automatskog isključivanja u slučaju neke greške. Ukoliko zbog greške dođe do automatskog isključivanja električnog jastučića, na prekidaču ne svijetli prikaz nivoa temperature čak i ako je jastučić uključen. Imajte na umu da nakon ovakvog slučaja električni jastučić iz sigurnosnih razloga ne možete upaliti i isti trebate odnijeti u servis za kupce ili kod ovlaštenog trgovca.

### 4.2 Stavljanje u rad



Pazite da se električni jastučić kada je upaljen ne savije ili se ne stvore nabori.

- Ponajprije spojite prekidač za grijnim tijelom.
- Nakon toga uključite utikač u struju (utičnicu).

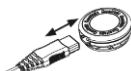

### NAPOMENA

Strana sa prekrivačem (7) sa integrisanim električnim jastučićem treba biti okrenuta prema tijelu kako bi zagrijavanje i prijenos toplote bili optimalni.

### 4.3 Paljenje

Klizni prekidač stavite na poziciju ON/OFF i nivo temperatura na nivo 1, 2 ili 3. U upaljenom stanju temperaturni nivoi (4) su osvijetljeni.

### 4.4 Podešavanje temperature

Nivo 0: UGAŠENO

Nivo 1: minimalno zagrijavanje

Nivo 2: srednje zagrijavanja

Nivo 3: maksimalno zagrijavanje

### NAPOMENA

Najbrže zagrijavanje električnog jastučića postizete tako što nivo temperature podesite na najviši.

### NAPOMENA

Ovaj električni jastučić ima brzo zagrijavanje pomoću kojeg se električni zasućić za 10 minuta zagrije.



Ukoliko električni jastučić koristite u trajanju od više sati, preporučujemo da nivo temperature podesite na najniži kako bi izbjegli pregrijavanje dijela tijela koji zagrijavate i kao posljedicu moguće opekotine.

### 4.5 Automatsko gašenje

Ovaj električni jastučić ima automatsko gašenje. Ova funkcija gasi uređaj nakon cca. 90 minuta neprestanog rada uređaja. Tada prikaz za nivo temperature počinje da treperi. Kako bi ponovo upalili električni jastučić potrebno da je klizni prekidač postavite na poziciju ON/OFF i nivo temperature (5) prvo na „0“ (UGAŠENO). Nakon otprilike 5 sekundi moguće je ponovo upaliti električni jastučić.



### 4.6 Gašenje

Klizni prekidač stavite na poziciju ON/OFF i temperaturni nivo „0“ (UGAŠENO) kako bi ugasili električni jastučić. Nivoi temperature više nisu osvijetljeni.

### NAPOMENA

Ukoliko više nećete koristiti električni jastučić, tada klizni prekidač stavite na poziciju ON/OFF i temperaturni nivo „0“ (UGAŠENO) i izvucite utikač iz utičnice. Nakon toga kabal odvojite od električnog jastučića.

## 5. Čišćenje i održavanje



Prije čišćenja uvijek izvucite kabal iz struje. Nakon toga isti izvucite iz električnog jastučića. U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.



- Prekidač ni u kojem slučaju ne smije doći u dodir sa vodom ili drugim tečnostima. U suprotnom se može oštetiti.

Za čišćenje prekidača koristite suhu krpu. Nemojte koristiti hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Električni jastučić se sastoji od presvlake sa integrisanim električnim jastučićem (vanjski) i unutrašnjim jastučićem. Prije čišćenja uvijek prije izvadite unutrašnji jastučić. U tu svrhu otvorite zatvarač. Unutrašnji jastučić se ne može prati.

Manje fleke na presvlaki sa integrisanim električnim jastučićem mogu se čistiti vlažnom krpom sa nešto blagog sredstva za čišćenje.

Presvlaka sa integrisanim električnim jastučićem se može prati u mašini za veš. Iz ekoliških razloga isti perite zajedno sa drugim stvarima. Mašinu za pranje veša podesite na program za fino pranje na temperaturi od 30°C (pranje vune). Koristite blagi deterdžent i isti dozirajte prema uputama proizvođača za deterdžent.



#### **PAŽNJA**

Molimo da primite na znanje da se čestim pranjem presvlake sa integrisanim električnim jastučićem presvlaka može istrošiti. Stoga je treba prati maksimalno 10 puta tokom cijelog njenog životnog vijeka.



#### **PAŽNJA**

Imajte na umu da se presvlaka sa integrisanim električnim jastučićem ne smije čistiti u hemijskim čistionama, ne smije sušiti u sušilici ili peglati.

Odmah nakon pranja presvlaku rastegnite u njen prvobitni oblik i stavite ravno da se suši na stalak za sušenje veša.



#### **PAŽNJA**

- Nemojte koristiti štipaljke ili slično za pričvršćavanje presvlake sa integrisanim električnim jastučićem. Presvlaka bi se mogla oštetiti.
- Prekidač priključite na električni jastučić tek onda kada je presvlaka sa integrisanim električnim jastučićem, priključak i unutrašnji jastučić u potpunosti suhi. U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

Unutrašnji jastučić vratite u presvlaku sa integrisanim električnim jastučićem



#### **UPOZORENJE**

- Električni jastučić ni u kojem slučaju nemojte paliti kako bi se osušio! U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

### **6. Čuvanje**

Ako duže vrijeme nećete koristiti električni jastučić, preporučujemo da isti vratite u originalnu ambalažu.



#### **PAŽNJA**

Molimo da prije nego spakujete električni jastučić isti ostavite da se ponajprije ohladi. U suprotnom se električni jastučić može oštetiti. Za vrijeme odlaganja nemojte stavljati predmete na električni jastučić.

### **7. Odlaganje**

Molimo da ovaj električni pokrivač odlažete u skladu sa Uredbom za stare elektronske i električne aparate 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.



### **8. Šta učiniti u slučaju problema?**

<b>Problem</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Otklanjanje</b>
Temperaturni nivoi nisu osvijetljeni kada <ul style="list-style-type: none"><li>- je šalter u potpunosti povezan sa električnim jastučićem;</li><li>- je mrežni priključak (utikač) uključen u ispravnu utičnicu;</li><li>- je klizni prekidač na poziciji 1, 2 ili 3.</li></ul>	Sigurnosni sistem je električni jastučić nepovratno ugasio.	Električni jastučić odnesite Vašem trgovcu na servis.

### **9. Tehnički podaci**

Vidi tipku pločicu-etiketu na električnom jastučiću.