

beurer

SL 70



Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za ovaj proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.


Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

Isporuka

Provjerite da li je isporuka kompletirana i da li su prisutni svi dijelovi. Prije upotrebe uređaj i pribor treba pregledati da nisu vidno oštećeni. Ako sumnjate na oštećenja, uređaj nemojte koristiti. U tom slučaju obratite se Vašem trgovcu ili lokalnom servisu za kupce.

- 1 × uređaj za zaustavljanje hrkanja
- 3 × čepića za uho
- 1 × micro USB kabal za punjenje
- 1 × mrežni adapter

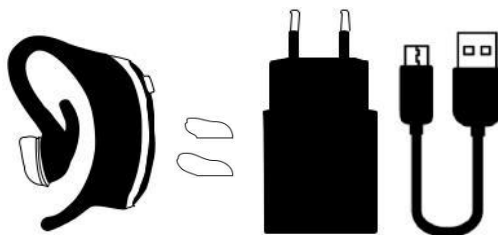

1. O uređaju

San je od velike važnosti za naše fizičko i psihičko blagostanje; Tokom sna obrađujemo stvari kao što su nove iskustva i poboljšavamo mentalnu tjelesnu kondiciju. Ukoliko prilikom spavanja hrčete, tada je

kvaliteta vašeg sna znatno umanjena. Beurer SL 70 je napravljen tako da redukuje hrkanje I da podigne kvalitetu sna na viši nivo, kao I vaše blagostanje.

Kako uređaj radi?

Uređaj je zakačen za desno ili lijevo uho I prilikom korištenja provjerava buku nastalu hrkanjem. Pored toga, hrkanje proizvodi vibracije koje se prenose preko kranijalnih kostiju(kosti lobanje) i koje su također detektirane pomoću ovog uređaja. Što prije uređaj prepozna buku I vibracije, počinje sa slanjem impulsa ušima. Ovi impulsi se sastoje od zvuka ili zvuka I vibracije. Jačina ovih impulsa raste od najnižeg nivoa dok ne postignete željeni uspjeh. Mišići grla postaju čvrsti i zračni putevi se otvaraju kao reakcija na impulse. Disanje se smiruje i hrkanje se smanjuje. Također možete promijeniti ležeći položaj. Dugoročno, postoji trajno smanjenje hrkanja kroz trening mišića grla. U početku može potrajati do 7 dana dok se ne naviknete na uređaj.

The “Beurer Sleep Quiet” aplikacija omogućava sljedeće funkcije:

- Detaljnu naalizu hrkanja, uključujući hrkanje po satima, trajanje snimanja I određivanje jačine hrkanja
- Kalendar sa dnevnikom hrkanja
- Pregled procjena (u danima/sedmicam/godinama)
- Podesiva jačina I osjetljivost impulsa

Kompatibilni system:

iOS verzija 8.0, Android™ verzija 4.4 sa Bluetooth® 4.0


Spisak uređaja koje podržava :



2. Opis simbola

Slijedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu.

	Upozorenje Upozorenje na opasnost od povreda ili opasnost po Vaše zdravlje.
	Pažnja Sigurnosna upozorenja na moguće kvarove na uređaju/priboru.
	Napomena Napomena o bitnim informacijama.
	Uređaj odlažite u skladu sa Odredbom za električne i elektronske stare uređaje EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Proizvođač

	CE certifikat da proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica.
---	---

3. Napomene



Upozorenje

- Zaštitite uređaj od udaraca, vlage, prljavštine, označene promjene temperature I izravne sunčeve svjetlosti.
- Ambalažu I uređaj držite van dometa djece. Može doći do gušenja.
- Uređaj nemojte čuvati u blizini izvora toplote I nemojte ga koristiti blizu kratko talasnih I mikro talasnih uređaja (~1m).
- Uređaj koristite I skladištite u prostorijama temperature između 0° C I 60° C. Više ili niže temperature mogu uzrokovati kvar na uređaju.
- Uređaj nije vodootporan, ali ima zaštitu od prskanja.
- Uređaj držite dalje od vode.
- Uređaj nemojte čistiti sa nekim hemijskim sredstvima ili abrazivnim sredstvima. Uređaj čistite povremeno blaznicom natopljenom sa 70% isopropyl alkoholom.
- Ukoliko Vaša koža Ili oči dođu u dodir sa tečnosti iz baterija, isperite zahvaćena područja vodom I zatražite lječničku pomoć.
- Zašтите baterije od toplote.
- Rizik od eksplozije! Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Nemojte rastavljati, dijeliti I lomiti baterije.
- Prije prve upotrebe, baterije napunite u potpunosti.
- U potpunosti napunite bateriju barem svaka 3 mjeseca.
- Prije prve upotrebe baterije morate napuniti na ispravan način koji možete naći u ovom uputstvu.

4. Opis uređaja

1. Tipka za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
2. Svijetlo za rad


Zelena: baterija na 41-100%

Crvena: baterija na 0-40 %

3. Bluetooth® svjetlo

4. Micro USB povezivanje

5. Čepić za uho

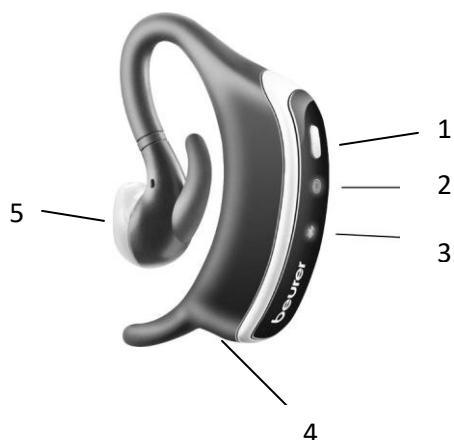

5. Prije prve upotrebe

5.1 Povezivanje uređaja na “Beurer Sleep Quiet” aplikaciju

Možete koristiti osnovne funkcije uređaja bez aplikacije. Dodatne mogućnosti kao što su snimanje, statistike, calendar I postavke su dostupne isključivo sa “Beurer Sleep Quiet” aplikacijom.

Za spajanje na aplikaciju, slijedite sljedeće upute:

1. Provjerite da li je vaš mobitel spojen na internet.
2. Aktivirajte Bluetooth® na svom mobitelu.
3. Sa Apple App Store-a (iOS) ili sa Google Play-a (Android) besplatno skinite “Beurer SleepQuiet” aplikaciju.



Ovisno o postavkama vašeg telefona, mogu nastati dodatni troškovi za spajanje na Internet ili prijenos podataka.



4. Pokrenite aplikaciju I partite sljedeće upute.

5.2 Prikačite uređaj na uho

Uređaj možete prikačiti za desno ili lijevo uho.

Ovdje je jako važno da je otvor čepića za uho (5) okrenut prema ušnom kanalu kada ga prikačite.

- Uređaj prikačite za uho kako je prikazano na slici. Nemojte previše savijati gornji dio uređaja jer može doći do oštećenja.

1.



2.



3.



Ukoliko vam se čepić za uho pomiče, probajte neki od drugih koje ste dobili sa uređajem, kako biste pronašli onaj koji vam odgovara.

5.3 Upotreba

1. Pritisnite I držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) na uređaju 3 sekunde. Svjetla za rad se pale I to je znak da je uređaj uključen. Ukoliko uređaj ne može da se upali, provjerite bateriju. Napunite bateriju onako kako je objašnjeno u poglavlju “6. Punjenje baterije”. Nakon kratkog vremena. Svjetla za rad se gase kako vas ne bi ometala tokom noći.
2. Prikačite uređaj za desno ili lijevo uho kako je prikazano.
3. Idite u krevet.
4. Čim ustanete, uređaj ugasisite. Kako biste to uradili, držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) 3 sekunde. Kratka vibracija označava da je uređaj ugašen. U početku može potrajati do 7 dana dok se ne naviknete na uređaj.

6. Punjenje baterije

1. Otvorite poklopac na micro USB dijelu za povezivanje, na uređaju.
2. Spojite kabal za punjenje za uređaj I računar koji ste predhodno upalili. Također, možete koristiti I drugi način punjenja, pa spojite kabal za punjenje sa uređajem I mrežnim adapterom, a potom mrežni adapter uključite u odgovarajuću utičnicu.
3. Tokom punjenja na uređaju treperi zelena boja. Kada se baterija napuni u potpunosti, svijetlo prestaje da treperi I svijetli zelenom bojom.
4. Proces punjenja baterije u potpunosti otprilike traje 3 sata. Nakon što bateriju napunite u cjelosti, kabal za punjenje možete odspojiti iz računara ili utičnice I uređaja.
5. Nakon što bateriju napunite u cjelosti, ona vam može trajati otprilike 4-5 dana do sljedećeg punjenja. Kada se baterija isprazni I kapacitet padne ispod 41 % svijetlo na uređaju postaje crvene boje.

7. Prenos podataka na mobitel

Kako biste izvršili prenos podataka sa uređaja na “Beurer SleepQuiet” aplikaciju, slijedite sljedeće upute:

1. Aktivirajte Bluetooth® na svom mobitelu
2. Otvorite aplikaciju, Pritisnite ON/OFF tipku na uređaju. Snimljeni podaci su sada prebačeni na vaš mobitel. Za veće podatke, trebat će vam više vremena.

8. Odlaganje

Zbog zaštite okoliša, nemojte odlagati uređaj u kućni otpad. Uređaj odlažite u skladu sa Odredbom za električne i elektronske stare uređaje EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.



9. Tehnički podaci

Dimenzije	49 × 15 × 62 mm
Težina	16 g (bez čepića za uho)
Konekcija	Micro USB
Napon mrežnog adaptera	Ulazni: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.3 A Izlazni: 5 V ; 1000 mA
Zaštitna klasa mrežnog adaptera	■ Dvostruka zaštita
Baterija	80 mAh lithium polymer
Vijek trajanja baterije	Otpriblike 4 dana (ovisi od korištenja)
Memorija	1 noć
Materijal	Silikon
Prenos podataka	Bluetooth® niska energetska tehnologija
Dozvoljeni uslovi rada	Temperatura: 0° C - 60° C Relativna vlažnost: 30 - 75 % Pritisak: 860- 1060 hPa
Dozvoljeni uslovi sladištenja	Temperatura: -20° C - 60° C Relativna vlažnost: <75 % Pritisak: 8660- 1060 hPa

Ovime garantujemo da je ovaj proizvod u skladu s europskom R & TTE direktivom 1999/5 / EC. Obratite se navedenoj adresi servisa kako biste dobili detaljnije informacije kao što je CE deklaracija o sukladnosti. Bluetooth® naziv i logotipi su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih oznaka tvrtke Beurer GmbH je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi su oni njihovih vlasnika

